



F90

Maternal/Fetal Monitor

母亲/胎儿监护仪

NEW

准确密切监护母亲、胎儿的状况，
一丝不苟，为产前及围产期
母胎的安全悉心守候！

 **宝莱特**
BIOLIGHT

医疗监护设备民族品牌领航者

F90

Maternal/Fetal Monitor

母亲/胎儿监护仪

延续宝莱特胎儿监护

功能强大、性能稳定、母胎同步监护

- 胎心率、宫缩压力、胎儿活动等监护数据和曲线，胎动标记，医生事件标记，时间，报警等监护状态同屏显示；
- 监测胎心率、宫缩压力、胎动等胎儿参数的同时，也可对母亲的心电，无创血压，血氧饱和度，脉搏，呼吸，体温进行监测；
- 具有**双胎监护**功能。内置双胎动敏模块，只需多加一个胎心探头即可实现双胎监护；
- 独特的**胎心率正常范围区域标识功能**，监护曲线一目了然；
- 具有**手动/自动胎动识别记录功能**，可显示和打印胎儿活动曲线；
- 具有**自动监护模式**，允许用户根据习惯设置个性化工作参数；
- 具有**监护数据自动存储和回放功能**，可对历史数据数据进行存储和管理；
- 支持**临床事件标记**，胎儿刺激器动作标识，提高监护的灵敏度；
- 可选配**CTG评分模块**，实时回放并可分级打印评分，方便用户分析和参考；
- 内置**网络接口**，既可单独使用，也可连接中央站集中监护；
- 内置可插拔锂离子充电电池，可长时间持续供电；
- 人性化报警功能：**声光双重三级报警**（监护心率超限、探头脱落等多种声光报警功能）和双胎胎心重合报警，报警音量可调。


母亲/胎儿
监护仪



清晰、简略的显示界面，
使各监测参数的数值及胎心率曲线一目了然



胎儿标准界面

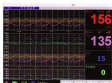

胎儿级联



母亲参数界面



母胎标准界面



母胎大字符

仪十年研发、制造的传统优势，再次出击！

简便的外观设计，便于医护人员操作



12.1" 彩色液晶屏幕，
触屏设计，相信使用环境
调整视角，使用简单方便。



中/英文操作菜单，
支持旋盘导航按钮，
可选配触摸屏，
方便临床操作。



内置热敏点阵记录仪，
152mm Z型打印纸，
可实时打印，定时打印，
历史数据回顾打印，
打印机走纸速度三级可调。



唤醒功能：
可选配胎儿唤醒器，
刺激胎儿胎动，
提高监护的敏感度。



胎心探头：
多晶片脉冲多普勒防水探头，
优秀的胎心信号捕捉及处理技术，
能准确快速测出胎心的参数。



宫缩压力探头：
精巧耐用防水的腹外宫缩压力探头，
防耦合剂渗透、灵敏度更高。

胎儿母体同步监护 比单纯胎儿监护更有益于指导分娩

- 胎儿母体同步监护图较一般胎儿监护图更有益于指导分娩。
- 对胎儿和母亲多项生理参数的同步监护技术，可以部分地弥补胎儿监护的不足，提高围产监护质量，有利于优生优育。通过胎儿母亲多参数监护有助于发现许多只凭胎儿监护图所不能发现的问题，如产程中减速的认识。通过全产程多参数监护发现胎心率的减速与母体心率的减少有关，这种现象常常发生在第二产程中。胎儿母亲多参数监护将多参数实时，同步显示在一个界面上，使医生可以清晰的看到母体与胎儿之间各种生命体征的互相影响，从而发现传统胎儿监护仪所不能发现的问题。如“母体低氧血症”的诊断。

——摘自《中国医疗器械杂志》



F90

Maternal Fetal Monitor

母亲/胎儿监护仪

广东宝莱特医用科技股份有限公司
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO.,LTD.

Developing with us 我们一起成长

母亲/胎儿监护仪监测附件



母亲心电图、呼吸、无创血压、血氧饱和度、胎心、体温的监测附件



胎儿胎心率、宫缩压力、胎动监测附件

F90

标配：胎心率、宫缩压力、胎动、ECG、NIBP、SpO₂、PR、Resp、Temp

选配：胎监评分模块、胎儿听诊器、双胞胎探头、触摸屏、体温探头、墙壁挂架

地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
电话：(0756)3399999 3399900 传真：(0756)3399920
E-Mail: sales@bl.com.cn 邮编：519085

总经24号: www.bl.com.cn
客户服务热线: 400 681 8235
※ 资料如遇更新, 请索取最新资料或登陆宝莱特网站查询
注册证号: 粤食药监械(准)字2012第2210708号
※ 本资料为内部场使用