



F50

Maternal/Fetal Monitor

母亲/胎儿监护仪

小巧便携、性能稳定、操作简便

 **宝莱特**
BIOLIGHT

医疗监护设备民族品牌领航者

F50

Mother/Fetal Monitor

母亲/胎儿监护仪

延续宝莱特胎儿监护


性能稳定、操作简便，满足产科各种环境的使用需求

- 7"彩色液晶显示屏，胎心率、宫缩压力、胎儿活动等监护数据和曲线，胎动标记、医生事件标记、时间、报警等监护状态同时显示；
- 监测胎心率、宫缩压力。胎动等胎儿参数的同时，也可对母亲的无创血压、血氧饱和度、脉搏进行监测；
- 具有胎儿界面、胎儿大字符、母胎界面、母胎大字符等多种显示界面可供选择；
- 具有**双胎监护功能**，内置双胎功能模块，只需另选配一个胎心探头即可实现双胎监护；
- 独特的胎心率正常范围区域标识功能**，监护曲线一目了然；
- 具有**手动/自动胎动识别记录功能**，可显示和打印胎儿活动曲线；
- 具备自动监护模式，允许用户根据习惯设置个性化工作参数；
- 具有**监护数据自动存储和回放功能**，可对历史病史数据进行存储和管理；
- 具有**档案自动存储功能**，可回放并选择输出打印；
- 可选配CTG评分模块，实时取并可分段打印评分，方便用户分析和参考；
- 内置网络接口，既可单独使用，也可连接中央站集中监护；
- 内置可插拔锂离子充电电池，可长时间持续供电，满足门诊及救护车的使用；
- 人性化报警功能：**声光双重三级报警**（监护心率超限，探头脱落等多种声光报警功能）和双胎胎心重合报警，报警音量可调。

母亲胎儿
监护仪




一目了然的显示界面， 有利于医护人员对母胎监护数据的观察

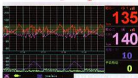

胎儿标准界面



胎儿大字符

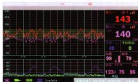

母胎标准界面



母胎大字符

仪十年研发、制造的传统优势，再次出击！


产品设计简洁、轻便、倾斜的屏幕设计，
符合人体工程学，使用方便舒适。



中/英文操作菜单，
支持旋钮导航按钮，
可选配触摸屏，
方便临床操作。



唤醒功能：
可选配胎儿唤醒器，
刺激胎儿胎动，
提高监护的敏感度。

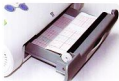

内置热敏点阵记录仪，
152mm Z型打印纸，
可实时打印，定时打印，
历史数据回顾打印，
打印纸进纸速度三级可调。



胎心探头：
多晶片脉冲多普勒防水探头，
优秀的胎心信号捕捉及处理技术，
能准确快速测出胎心的参数。

宫缩压力探头：
精巧耐用防水的腹外宫缩压力探头，
防耦合剂渗透，灵敏度更高。

满足产前检查、产前急救、
围产期全过程的胎儿、母亲各参数监护

- F50母亲/胎儿监护仪适用于产科对胎儿心率的监护。可测量、记录胎心率的波形以及母体宫缩引起的母体腹壁压力的波形，并可同时对母亲生命体征参数进行监护。另外通过产时观察胎儿对宫缩的反应，在产程进展中能随时观察分娩进程中的胎心状况及宫缩强弱，产程中不同时期选择性地使用胎儿监护仪监护产程，能较早发现胎儿宫内缺氧，尽早选择分娩方式，结束分娩，缩短胎儿宫内缺氧时间，能显著降低新生儿窒息率、HIE发生率及新生儿死亡率。



F50

Maternal/Fetal Monitor

母亲/胎儿监护仪

广东宝莱特医用科技股份有限公司
GUANGDONG BRIGHT MEDITECH CO., LTD.

Developing with us 我们一起成长

母亲/胎儿监护仪监测附件



母亲无创血压、血氧饱和度、脉率的监测附件



胎儿胎心率、宫缩压力、胎动监测附件

F50

标配：胎心率、宫缩压力、胎动、NIBP、SpO₂、PR

选配：胎监评分模块、胎儿唤醒器、双胎探头、触摸屏、墙壁挂架

地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
电话：(0750)3399999 3399900 传真：(0750)3399920
E-Mail: sales@blc.com.cn 邮编：519085

官方网站: www.blc.com.cn

客户服务热线: 400 881 8233

※ 资料如遇变更，请至最新资料或当地宝莱特网站查询
注册证号：粤食药监械（准）字2012第2210706号
※ 本资料为内部培训使用

F50-0329