



NEW

F30/F80

Fetal Monitor

胎儿监护仪



NEW

BLT® 宝莱特
BIOLIGHT

医疗监护设备民族品牌领航者

F30/F80

Fetal Monitor

胎儿监护仪

功能齐全、性能稳定，
满足产前检查、产前急救、产中分娩
全过程的胎儿监护


- 采用多晶片脉冲波多普勒防水探头，胎心信号捕捉稳定可靠；
- 具有胎儿界面、胎儿大字符显示界面、简洁的界面布局，使各监护参数清晰明了；
- 具有胎心率、宫缩压力、胎儿活动等监护数据和曲线，胎动标记，医生事件标记，时间、报警等监护状态同时显示；
- 具有手动/自动胎动识别记录功能，可同步显示和打印胎儿胎动曲线；
- 精巧耐用的防水的腹外宫缩压力探头，防耦合剂渗透，灵敏度高；
- 内置双胎功能模块，只需多选配一个胎心探头即可实现双胎监护；
- 可选配胎儿唤醒器，刺激胎儿苏醒，提高监护的敏感度；
- 内置热敏点阵记录仪，152mm Z型打印纸，可实时打印，历史数据回顾打印，实时打印打印纸速度三级可调；
- 具有监护数据自动存储和回放功能，可对历史监测数据进行存储和管理；
- 可选配CTG评分模块，实时回放并可分级打印评分，方便用户分析和参考；
- 内置可插拔锂离子电池，可长时间持续供电，保证不间断监护；
- 内置网络接口，既可单独使用，也可连接中央站集中监护；
- 人性化报警设置，声光报警范围，声音大小与报警延时可调。

F30
液晶显示屏


中英文操作菜单，
支持旋鈕导航按钮，
可选配触摸屏，
方便临床操作。



清晰、简略的显示界面，
使各监测参数的数值及胎心率曲线一目了然

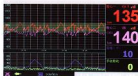


F30胎儿标准界面

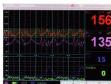

F80胎儿标准界面



F30胎儿大字符

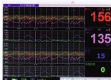

F80胎儿大字符

尽早发现胎儿宫内缺氧、缩短缺氧时间， 提高围产监护质量，有利于优生优育。

- 能尽早发现胎儿宫内缺氧。
- 能不间断地记录胎心率曲线，可全产程监护，降低胎宝宝的死亡率。
- 能确切记录胎心率变化。
- 及时发现胎心率曲线的细变异，即曲线的细波动。
- 通过产时观察胎儿对宫缩的反应，在产程进展中能随时观察分娩进程中的胎心状况及宫缩强弱。产程中不同时期选择性地使用胎儿监护仪监护产程，能较早发现胎儿宫内缺氧，尽早选择分娩方式。结束分娩，缩短胎儿宫内缺氧时间，能显著降低新生儿窒息率，HIE发生率及新生儿死亡率。
- 众所周知，胎儿的中枢神经系统对低氧的耐受力最差，又最缺乏储备能力。所以，哪怕只是短时间缺氧，也有可能影响将来的智力。在孕晚期及分娩期，预防胎儿中枢神经系统缺氧是做好围产期保健，推行优生工作的极其重要的一环。而监测胎儿中枢神经系统是否缺氧的最便捷可行的手段和指标，就是通过胎心率（FHR）的变化来进行分析。

胎儿监护仪



延续宝莱特胎儿监护仪 十年研发、制造的传统优势， 再次出击！

F80

液晶显示屏
触屏设计，数据使用
环境调整优势，使
用简单方便

中英文操作菜单，
支持旋钮导航按钮，
可选配触摸屏，
方便临床操作。



F30/F80

Fetal Monitor

胎儿监护仪

广东宝莱特医用科技股份有限公司
GUANGDONG BIDLIGHT MEDITECH CO., LTD.

Developing with us 我们一起成长

胎儿监护仪监测附件



胎儿胎心率、宫缩压力、胎动监测附件



胎儿多普勒



胎儿多普勒

F30/F80

标配：胎心率、宫缩压力、胎动

选配：胎盒评分模块、胎儿多普勒、双胎胎探头、触模屏、墙壁挂架

地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
电话：(0756)3399599 3399900 传真：(0756)3399920
E-Mail: sales@bit.com.cn 邮编：519085

官网网址: www.bit.com.cn
客户服务热线: 400-881-8233
※ 资料如遇变更, 请参照最新资料或登陆宝莱特网站查询
注册证号: 粤食药监械(注)字2012第2230705号
※ 本资料为内部培训使用